



medifa 5000

Mobile
OP-Tische



we care.

medifa 5000

- Manuelle und elektromechanische Modelle
- Varianten mit niedriger Aufstiegshöhe (600 mm)
- Wahlweise mit oder ohne Längsverschiebung
- Wahlweise mit viskoelastischen Schaumstoff-Polstern oder PUR-Polstern ausstattbar
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
- Einfache Manövrierbarkeit
- Leichtgängige Auslösemechanismen
- Durchdachtes Bedienkonzept
- Vielfältige Einsatz- und Lagerungsmöglichkeiten
- Für Röntgen- und C-Bogen-Einsatz geeignet
- Umfangreiche Zubehörpalette für alle chirurgischen Disziplinen
- Maximal zulässige Gesamtbelastung bis 250 kg (550 lbs)



medifa 5000 manuell



Manueller Operationstisch

Art.-Nr. 501130

- Höhenverstellung mittels Fußpumpenhydraulik von 750 bis 1000 mm
- Trendelenburgverstellung, gasdruckfederunterstützt, verstellbar von -30° bis +30°
- Lateralverstellung mittels abnehmbarer Handkurbel, beidseitig verstellbar bis 20°
- Rückenlehnenverstellung, gasdruckfederunterstützt von -40° bis +70°
- Möglichkeit zur Einstellung der Flex-/ Reflexposition
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Seitl. Schienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Wahlweise PUR-Polsterauflage (H= 60 mm) oder viskoelastische Schaumstoff-Polster (H= 80 mm), elektrisch leitfähig, abnehmbar*
- Fahrbarkeit über vier Doppellenkrollen \varnothing 125 mm mit Zentralfeststellung

Weitere manuelle Varianten:

Art.-Nr. 501135

Zusätzlich mit Längsverschiebung 310 mm

Art.-Nr. 503220

Mit handfreier Funktionsauslösung mittels Fußpumpenhydraulik

Art.-Nr. 503225

Mit handfreier Funktionsauslösung mittels Fußpumpenhydraulik und Längsverschiebung 310 mm

Konfigurationsempfehlung

Art.-Nr. 501130
Manueller OP-Tisch

Art.-Nr. 61144
Kopfplatte

Art.-Nr. 61655
Gallenbank

Art.-Nr. 61615
Geteilte Beinplatten

Art.-Nr. 61220
Armauflage

Preis auf Anfrage!

Fachgebiete

- Ambulanz
- Allgemein Chirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- Proktologie

Alle Varianten des medifa 5000 können mit einer Vielzahl an optionalen Zubehören ausgestattet werden!

*Die Operationstische der Serie medifa 5000 werden ab 2019 mit schwarzen (anstatt grünen) PUR-Polstern geliefert.

medifa 5000 elektromechanisch



Elektromechanischer Operationstisch

Art.-Nr. 504220

- Elektromechanische Höhenverstellung von 780 - 1080 mm
- Elektromechanische Trendelenburgverstellung von -30° bis +25°
- Elektromechanische Lateralverstellung, beidseitig 20°
- Gasdruckfederunterstützte Rückenlehnenverstellung von -40° bis +70°
- Möglichkeit zur Einstellung der Flex-/ Reflexposition
- Automatische Nullstellung
- Kabelfernbedienung mit Farbdisplay und Batterieanzeige
- Zusätzliche Bedieneinheit an der Tischsäule
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Seitl. Schienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Wahlweise PUR-Polsterauflage (H= 60 mm) oder viskoelastische Schaumstoff-Polster (H= 80 mm), elektrisch leitfähig, abnehmbar*
- Fahrbarkeit über vier Doppelenkrollen ø 125 mm mit Zentralfeststellung
- Netzbetrieb 110 V oder 220 V/ 50-60 Hz, inkl. Akkumulatoren und Ladegerät



Weitere elektromechanische Varianten mit Standardhöhe:

Art.-Nr. 504225

Zusätzlich mit Längsverschiebung von bis zu 285 mm

Art.-Nr. 504320

Zusätzlich mit elektromechanischer Rückenlehnenverstellung

Art.-Nr. 504325

Zusätzlich mit elektromechanischer Rückenlehnenverstellung und Längsverschiebung von bis zu 285 mm



- Alle elektromechanischen Varianten auch mit niedriger Aufstiegshöhe (600 mm) erhältlich
- Wahlweise mit manueller oder elektromechanischer Rückenteilverstellung
- Übersicht aller Konfigurationsmöglichkeiten auf Seite 12-13

Konfigurationsempfehlung

Art.-Nr. 504220

Elektromechanischer OP-Tisch

Art.-Nr. 61144

Kopfplatte

Art.-Nr. 61655

Gallenbank

Art.-Nr. 61615

Geteilte Beinplatten

Art.-Nr. 61220

Armauflage

Preis auf Anfrage!

Fachgebiete

- Ambulanz
- Allgemein Chirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- Proktologie

*Die Operationstische der Serie medifa 5000 werden ab 2019 mit schwarzen (anstatt grünen) PUR-Polstern geliefert.

Bedienkonzept



- Farbdisplay mit Batteriekapazitätsanzeige
- Ausführen von bis zu drei beliebigen Anwendungspositionen
- Abspeichern von bis zu drei beliebigen Anwendungspositionen
- Reverse-Mode
- Positionierungstasten
- Not-Stop-Taste
- Aktivierung des Handschalters
- Automatische Nullstellung

1. Standard: Hintergrundbeleuchteter Handschalter mit Batterieanzeige und Farbdisplay
2. Standard: Zusätzliches Bedienfeld an der Tischsäule
3. Optional: Zusätzlicher, kabelloser Infrarot-Handschalter (Art.-Nr. 604070; nicht nachrüstbar)
4. Optional: Fußschalter für Höhen-, Lateral- und Trendelenburgverstellung (Art.-Nr. 604060)



Funktionalität und Komfort



- Schnelle und einfache Bedienung
- Leichtgängige Auslösemechanismen



- Mehrlagige, viskoelastische Schaumstoff-Polster
- Höhe: 80 mm
- Abnehmbar
- Elektrisch ableitfähig



- Leichte Manövrierbarkeit durch Doppellenkrollen und fünftes Rad
- Spezielle Sockelbauweise ermöglicht optimale Fußfreiheit des Operateurs



- Ergonomisch geformte PUR-Polster*
- Höhe: 60 mm
- Abnehmbar
- Elektrisch ableitfähig

*Die Operationstische der Serie medifa 5000 werden ab 2019 mit schwarzen (anstatt grünen) PUR-Polstern geliefert.



		Manuell			
Verstellbereich		501130	501135	503220	503225
	Höhenverstellung	750 - 1000 mm	○	○	○
	Höhenverstellung	780 - 1080 mm			
	Höhenverstellung	600 - 950 mm			
	Trendelenburg	-30° / +30°	■	■	○
	Trendelenburg	-30° / +25°			
	Lateralverstellung	-20° / +20°	■	■	○
	Rückenteilverstellung	-40° / +70°	■	■	○
	Längsverschiebung	310 mm		■	■
	Längsverschiebung	285 mm			
	Nullstellung				
	Flexbewegung		■	○	○
	Zentralbremse		■	■	■
	Körperbrücke		◆	◆	◆
	Fünftes Rad		◆	◆	◆
	Memory (3 Positionen)				
	Maximal zulässige Gesamtbelastung	200 kg	200 kg	250 kg	250 kg

		Elektromechanisch Standard			
		504220	504225	504320	504325
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		■	■	●	●
			●		●
		●	●	●	●
		■●	■●	●	●
		■	■	■	■
		◆	◆	◆	◆
		◆	◆	◆	◆
		●	●	●	●
		200 kg	200 kg	250 kg	250 kg

		Elektromechanisch mit niedriger Höhe			
		505220	505225	505320	505325
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		■	■	●	●
			●		●
		●	●	●	●
		■●	■●	●	●
		■	■	■	■
		◆	◆	◆	◆
		●	●	●	●
		200 kg	200 kg	250 kg	250 kg


● Elektrisch ○ Handfreie Bedienung ■ Manuell ◆ Optional

Technische Informationen

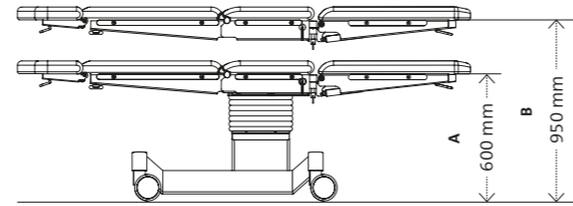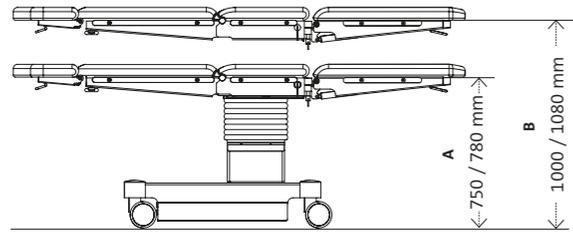






Varianten	Verstellbereich	
	Höhe A	Höhe B
501130 / 501135 / 503220 / 503225	750 mm	1000 mm
504220 / 504225 / 504320 / 504325	780 mm	1080 mm

Varianten	Verstellbereich	
	Höhe A	Höhe B
505220 / 505225 / 505320 / 505325	600 mm	950 mm

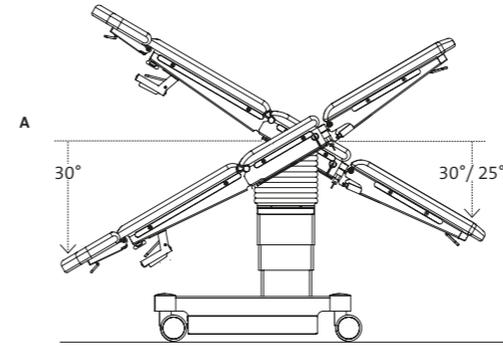





Varianten	Verstellbereich	
	A	B
501130 / 501135 / 503220 / 503225	30°	30°
504220 / 504225 / 504320 / 504325	30°	25°
505220 / 505225 / 505320 / 505325	30°	25°

Varianten	Intraoperative Bildgebung
501135 / 503225	
504225 / 504325 505225 / 505325	

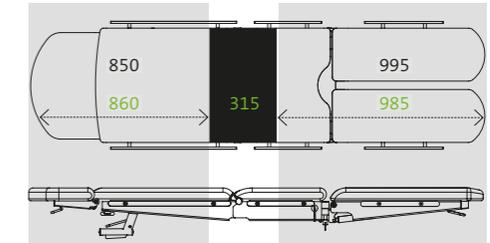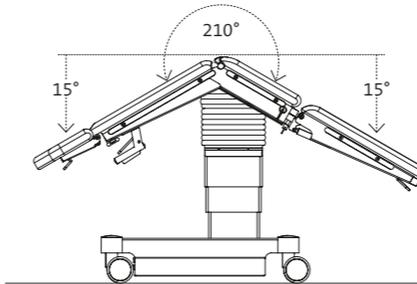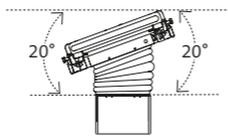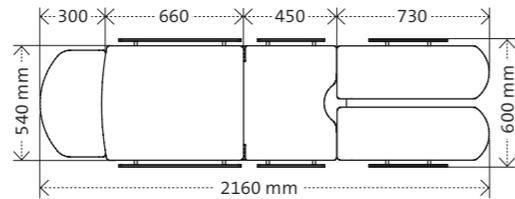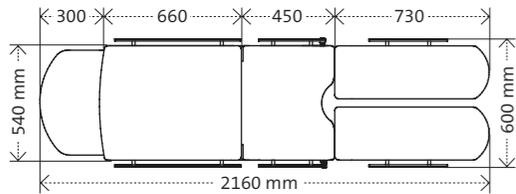


Längsverschiebung links

Längsverschiebung rechts

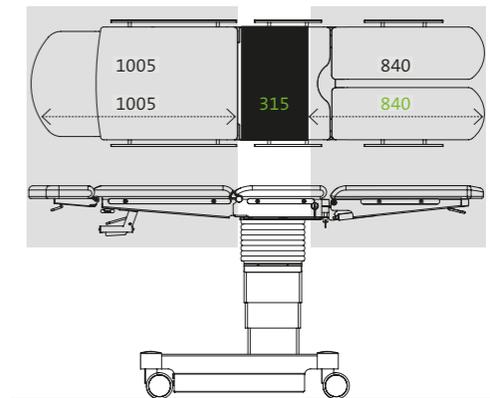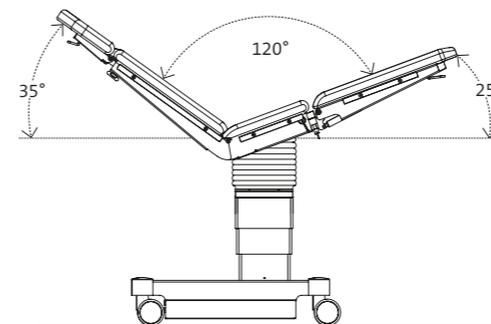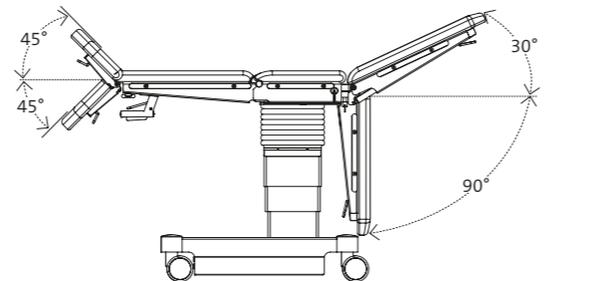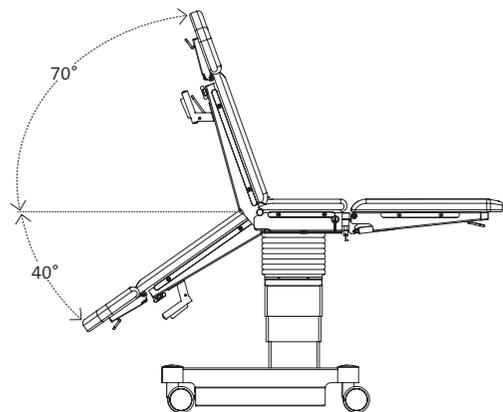

Nullposition

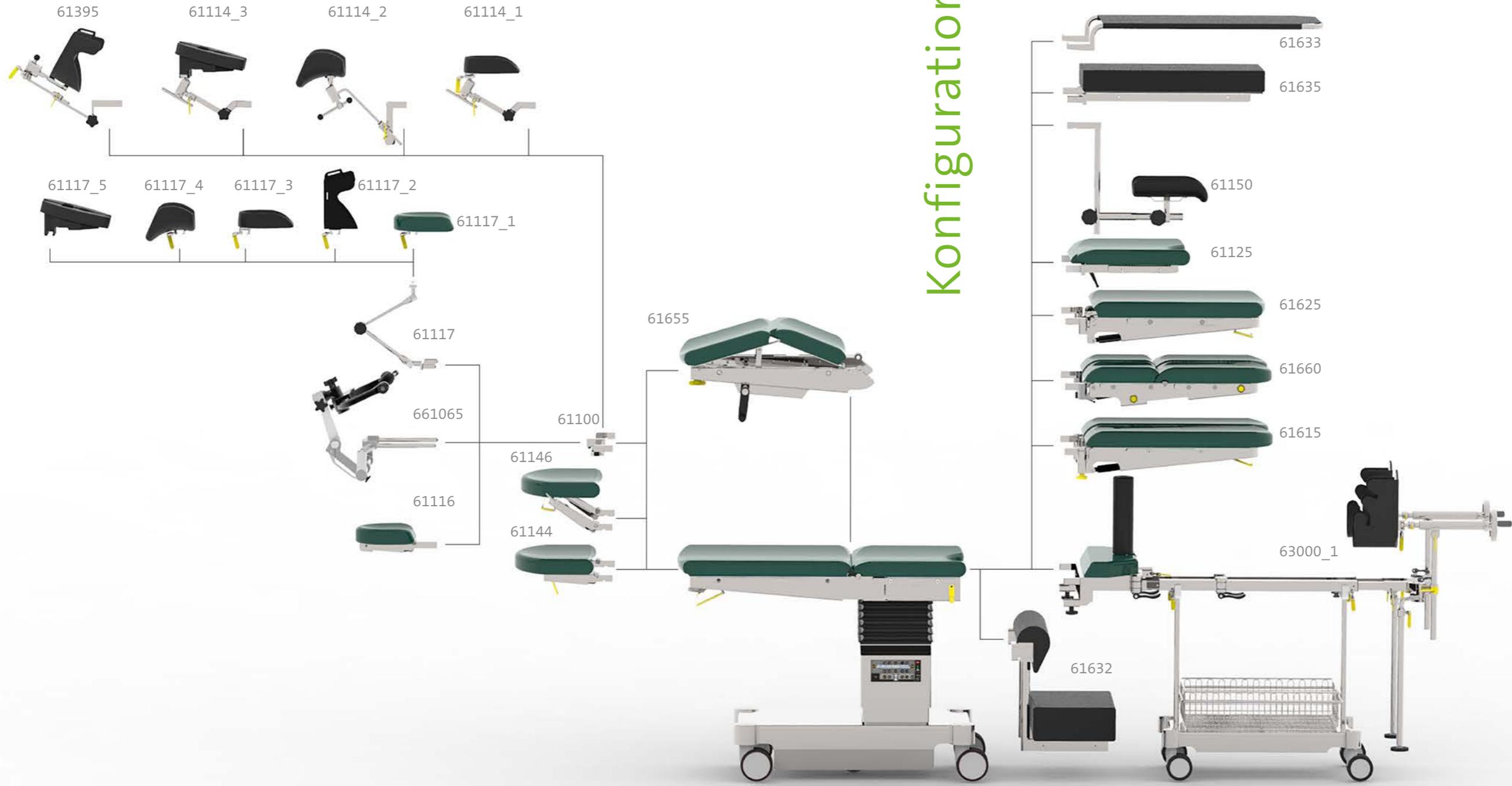

Konfiguration

Zubehör für medifa 5000



Kopfplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61144

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -45° bis +45°
- L x B: 285 x 495 mm
- An- und Abkopplung an Rückenplatte
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61144SF)



Kopfplatte mit Doppelgelenk für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61146

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -45° bis +45°, zusätzliche Neigung durch Doppelgelenk
- L x B: 285 x 495 mm
- An- und Abkopplung an Rückenplatte
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61146SF)



Kleine Kopfplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61143


- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -45° bis +45°
- L x B: 230 x 230 mm
- An- und Abkopplung an Rückenplatte
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61143SF)



Körperbrücke für medifa 5000 und Variante 601120

Art.-Nr. 61655

- Ausfahrbar mittels Handkurbel
- L x B: je Segment 315 x 170 mm
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61655SF)
- Kompatibel mit Variante 601120
- Nicht nachrüstbar!

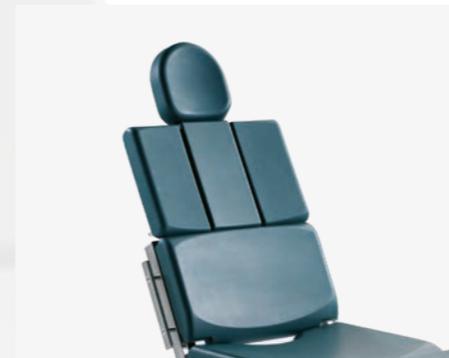

Dreigeteilte Rückenplatte für medifa 5000 und Variante 601120

Art.-Nr. 61385

- Inkl. Kopfplatte mit Gasdruckfederverstellung
- Einfacher Zugang zum Schulterbereich durch drei abnehmbare Segmente
- An- und Abkopplung am Beckenteil (Reverse-Mode)
- L x B: je Segment 315 x 170 mm
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61385SF)
- Kompatibel mit Variante 601120



Beckenteilverlängerung für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61125

- Verlängerung des Beckenteils um 430 mm
- Polsterausschnitt
- L x B: 430 x 540 mm
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61125SF)

Zubehör für medifa 5000



Einteilige Beinplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61625

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -90° bis $+30^\circ$
- L x B: 670 x 540 mm
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61625SF)



Geteilte Beinplatten für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61615

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -90° bis $+30^\circ$, schwenkbar um bis zu 180°
- L x B: jede 730 x 250 mm
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: PUR, H= 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61615SF)



Doppelt geteilte Beinplatten für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61660

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -90° bis $+30^\circ$, schwenkbar um bis zu 180°
- L x B: jede 720 x 250 mm
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: PUR, H= 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61660SF)



Carbonlagerungsplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61690

- Sehr gute Durchleuchtbarkeit (360°)
- An- und Abkopplung an Beckenteil oder unterem Rückenteil
- L x B: 750 x 540 mm
- Polster: Viskoelastischer Schaumstoff, H= 60 mm, elektrisch ableitfähig



Transfer-Beinplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61635

- Für die kurzzeitige Lagerung der Beine
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- L x B: jede 900 x 500 mm
- Material: Edelstahl



Kinderchirurgieplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61633

- An- und Abkopplung an Beckenteil
- L x B: 700 x 430 mm
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: Viskoelastischer Schaumstoff, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, abnehmbar

Zubehör für medifa 5000



Verbreiterungssegmente für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61355

- Segmente zur Verbreiterung der OP-Tisch-Liegefläche
- L x B: je Segment 310 x 105 mm
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61355SF)
- Mengeneinheit: Paar



Fußschalter für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 604060

- Zur Steuerung der Grundfunktionen Höhen-, Lateral- und Trendelenburg-verstellung
- Kabelgebunden
- Nicht nachrüstbar!



Infrarot Handschalter medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 604070

- Kabellose Datenübertragung
- Bedienfeld für alle elektrischen OP-Tisch-Funktionen
- Inkl. Ladestation



Fünftes Rad für medifa 5000

Art.-Nr. 50645

- Zuschaltbar für eine verbesserte Manövrierfähigkeit des Operationstisches
- Nicht nachrüstbar!



Verbindungsstrebe für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61670

- Austausch der Edelstahl-Verbindungsstrebe am Rückenteil gegen eine röntgentransparente Verbindungsstrebe aus speziellem Kunststoff
- Verbessert die Röntgentransparenz des Rückenteils



Kassettenschieber für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61640

- Zum Einschieben von Röntgenkassetten
- Ausziehbare Teleskopstange
- L x B x H: 470 x 385 x 16 mm
- Für Röntgenkassetten mit Maßen 14" x 17" (US) geeignet
- Material: Edelstahl

Zubehör für medifa 5000



TUR-Spülset für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61120

- Bestehend aus Ablaufschale, Eimer, Becken, Sieb, Schlauch und Fahrgestell
- Adaption am Beckenteileinschub
- L x B x H (Schale): 325 x 265 x 65 mm
- Volumen (Eimer): 15 Liter



Polsterauflage für medifa 5000 und Variante 601120

Art.-Nr. 5000SF

- Alternative Polsterung der Liegefläche mit viskoelastischen Komfort-Polstern
- Mit drei verschiedenen Schaumstoffschichten
- Mit Memoryeffekt
- Für Operationstische mit einer einteiligen Rückenplatte
- Polsterhöhe: 80 mm



Ergänzendes Zubehör

Eine Vielzahl an Anbauzubehör ergänzt die disziplinären Anwendungsmöglichkeiten der Operationstische.

Zur zentralen Lagerung des Zubehörs, dient ein Zubehörwagen (Art.-Nr. 341045) aus poliertem Edelstahl.

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Prospekt „Zubehör für Operationstische“.



medifa

Die medifa healthcare group vereint Kompetenz rund um den OP unter einem Dach.


medifa® ist ein inhabergeführtes und weltweit agierendes Unternehmen in der Medizintechnik und deckt mit ihrem Produkt- und Leistungsportfolio den kompletten Bereich von modularen Wand-, Tür- und Decken-Systemen (RooSy® Room Systems) für den schlüsselfertigen OP, mobilen OP-Tischen und OP-Tisch Zubehör bis zu Untersuchungsstühlen ab. Einer der größten deutschen OEM-Zulieferer im Medizintechnik Sektor ist ebenfalls Teil von medifa.

Zur Gruppe gehören die medifa GmbH & Co. KG (Finnentrop), die medifa hygienic rooms GmbH (Ötigheim) und die medifa metall und medizintechnik GmbH in Rastatt. Die medifa healthcare group beschäftigt an drei Standorten in Deutschland rund 350 Mitarbeiter. Planung, Engineering und Fertigung erfolgen ausschließlich in Deutschland und mit über 90% Wertschöpfung im Unternehmensverbund gewährleistet die Gruppe kurze Reaktionszeiten.

Unter dem Motto „we care“ versteht man bei medifa® die konsequente Ausrichtung nach den Bedürfnissen ihrer Kunden. Kunden weltweit können sich auf erstklassige Beratung, Abwicklung und Qualität aus einer Hand made in Germany nach zertifizierten nationalen und internationalen Qualitätsstandards verlassen.

Standorte und Export

- Modulare OP-Raum-Systeme: Decken, Türen, Wände (RooSy)
- Mobile OP-Tische und OP-Tisch-Zubehör
- Untersuchungs- und Behandlungsstühle
- Sonderbaulösungen

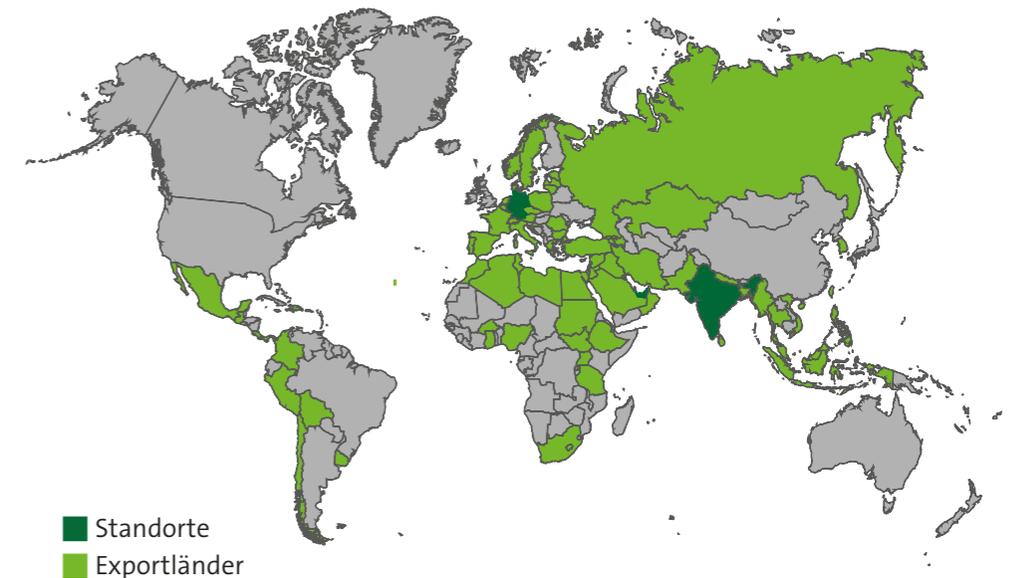



Version 01-19-DE
Änderungen vorbehalten.

www.medifa.com

medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
57413 Finnentrop

Germany

fon +49 2721 71 77 -0

fax +49 2721 71 77 -255

info@medifa.com

we care.