



medifa 6000

Mobile
OP-Tische




we care.

medifa 6000

- Elektrohydraulische Funktionsauslösungen
- Zusätzliches, manuelles Sicherheitssystem zur Funktionsauslösung integrierbar
- Wahlweise mit oder ohne Längsverschiebung
- Wahlweise mit viskoelastischen Schaumstoff-Polstern oder PUR-Polstern ausstattbar
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
- Einfache Manövrierbarkeit
- Leichtgängige Auslösemechanismen
- Durchdachtes Bedienkonzept
- Vielfältige Einsatz- und Lagerungsmöglichkeiten
- Für Röntgen- und C-Bogen-Einsatz geeignet
- Umfangreiche Zubehörpalette für alle chirurgischen Disziplinen
- Maximal zulässige Gesamtbelastung bis 454 kg



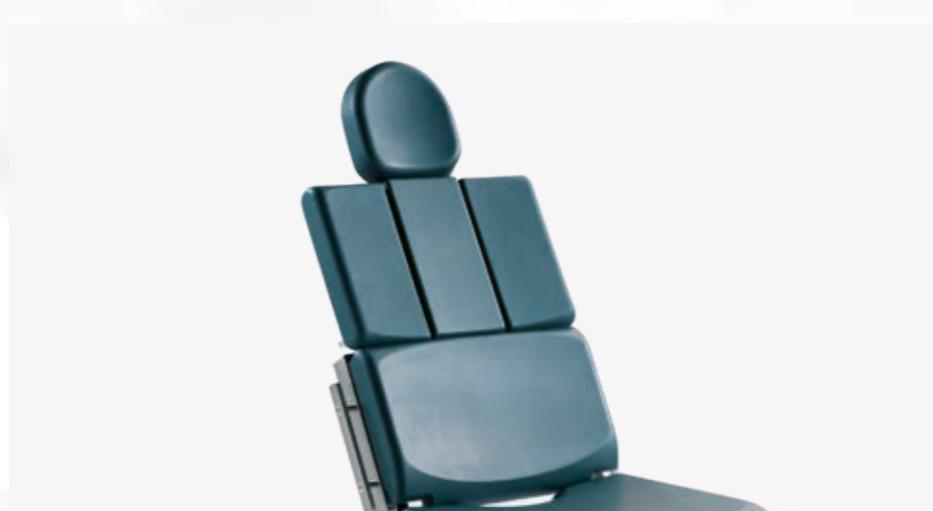

Elektrohydraulischer Operationstisch

Art.-Nr. 601700

- Höhenverstellung von 690 - 1050 mm
- Trendelenburgverstellung von -30° bis +30°
- Lateralverstellung bis 20°
- Verstellbarkeit der oberen Rückenlehne von -35° bis +50°
- Verstellbarkeit der unteren Rückenlehne von -40° bis +70°
- Flex- / Reflexposition
- Automatische Nullstellung
- Möglichkeit der Patienten-Reverse-Lagerung
- Seitliche Führungsschienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Fahrbarkeit mit Zentralbremse
- Zuschaltbarkeit eines 5. Rades
- Wahlweise PUR-Polsterauflage (H: 60 mm) oder viskoelastische Schaumstoff-Polster (H: 80 mm), elektrisch leitfähig, abnehmbar*
- Maximal zulässige Gesamtbelastung: 454 kg (1,000 lbs)

Weitere Varianten:

Art.-Nr. 601820

Zusätzlich mit Längsverschiebung von bis zu 300 mm

Art.-Nr. 601120

Mit einteiliger Rückenlehne, zusätzlich mit Längsverschiebung von bis zu 300 mm

Konfigurationsempfehlung

Art.-Nr. 601700

Elektrohydraulischer OP-Tisch

Art.-Nr. 61144

Kopfplatte

Art.-Nr. 61250

Obere Rückenplatte

Art.-Nr. 61615

Geteilte Beinplatten

Art.-Nr. 61220

Armauflage

Preis auf Anfrage!

Fachgebiete

- Allgemein Chirurgie
- Orthopädie
- Gynäkologie
- Urologie
- HNO-Chirurgie

- Die Variante 601120 ist mit einer optionalen manuellen Körperbrücke ausstattbar
- Alle Varianten des medifa 6000 können mit einer Vielzahl an optionalen Zubehören ausgestattet werden

Bedienkonzept



- Farbdisplay mit Batteriekapazitätsanzeige
- Navigations- und Bestätigungstasten
- Reverse-Mode
- Zentralbremse
- Positionierungstasten
- Aktivierung des Handschalters
- Not-Stop-Taste
- Automatische Nullstellung

1. Standard: Hintergrundbeleuchteter Handschalter mit Batterieanzeige und Farbdisplay (zusätzlich auch mit kabellosen Infrarot-Handschalter erhältlich, Art.-Nr. 604070, nicht nachrüstbar)
2. Standard: Zusätzliches Bedienfeld an der Tischsäule
3. Optional: Fußschalter für Höhen-, Lateral- und Trendelenburgverstellung (Art.-Nr. 604060)
4. Optional: Manuelles Sicherheitssystem mittels Fußpedalauslösung (Art.-Nr. 50655; nicht nachrüstbar)



Funktionalität und Komfort



- Schnelle und einfache Bedienung
- Leichtgängige Auslösemechanismen



- Mehrlagige, viskoelastische Schaumstoff-Polster
- Höhe: 80 mm
- Abnehmbar
- Elektrisch ableitfähig



- Leichte Manövrierbarkeit durch Doppellenkrollen und fünftes Rad
- Spezielle Sockelbauweise ermöglicht optimale Fußfreiheit des Operators



- Ergonomisch geformte PUR-Polster*
- Höhe: 60 mm
- Abnehmbar
- Elektrisch ableitfähig

*Die Operationstische der Serie medifa 6000 werden ab 2019 mit schwarzen (anstatt grünen) PUR-Polstern geliefert.

Varianten



	Verstellbereich	601120	601700	601820
Höhenverstellung	690 - 1050 mm	●	●	●
Trendelenburg	-30° / +30°	●	●	●
Lateralverstellung	-20° / +20°	●	●	●
Rückenteilverstellung (unteres Segment)	-40° / +70°	●	●	●
Rückenteilverstellung (oberes Segment)	-35° / +50°	●	●	●
Flexbewegung		●	●	●
Verschiebbarkeit der Tischplatte	300 mm	●	●	●
Fünftes Rad		●	■	■
Automatische Nullstellung		●	●	●
Zentralbremse		●	●	●
Körperbrücke		◆■	●	●
Manuelle Sicherheitsfunktion		◆	◆	◆
Stabilitätszylinder am Sockel		◆	◆	◆
Maximal zulässige Gesamtbelastung		454 kg	454 kg	454 kg

● Elektrohydraulisch ■ Manuell ◆ Optional

Lagerungsbeispiele



Reverse-Position mit Längsverschiebung



Seitliche Lagerung in Flex-Position für Eingriffe an Thorax und Niere



Lagerung mit Körperbrücke für Eingriffe an der Gallenblase



Rückenlagerung in Beach-Chair-Position für Struma-Eingriffe

Lagerungsbeispiele



Steinschnittlage mit Beinhaltern für gynäkologische Eingriffe



Steinschnittlage mit Beinhaltern und Ablauf für urologische Eingriffe



Lagerung mit Schädelklemmensystem für neurochirurgische Eingriffe



Lagerung mit Unterschenkelextension zur Behandlung von Tibiafrakturen



Proktologische Lagerung mit Kniestützen und Druckentlastungskissen










Rückenlagerung mit Kopfkalottensystem für neurochirurgische Eingriffe




Lagerung mit Extensionsgerät zur Behandlung von Femoralfrakturen







Lagerung mit Armauflage und Armextension zur Behandlung von Armfrakturen

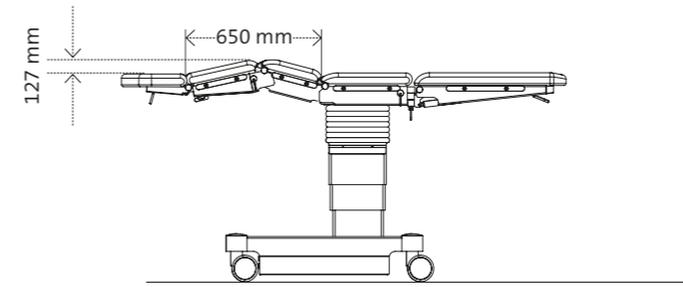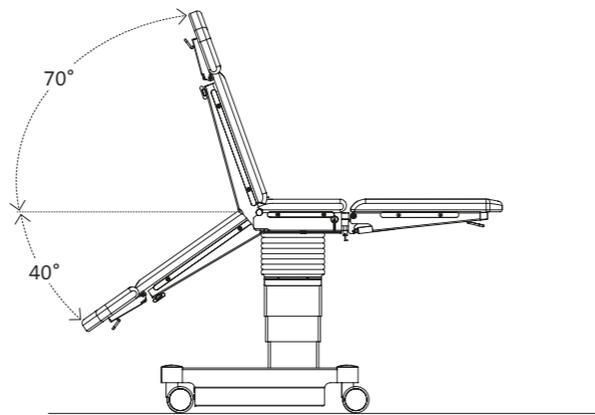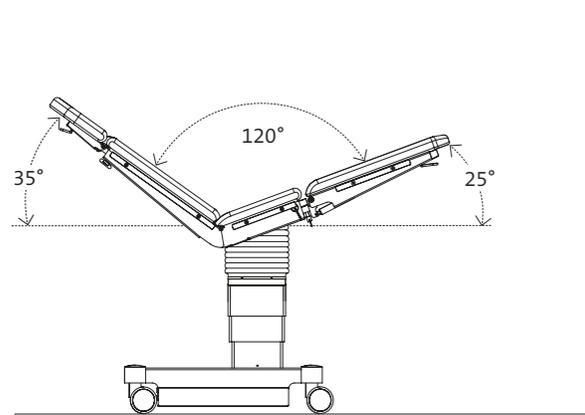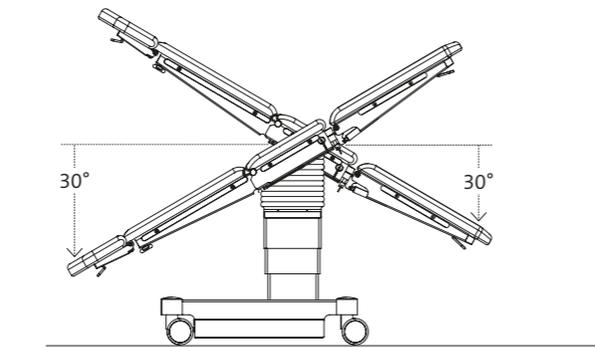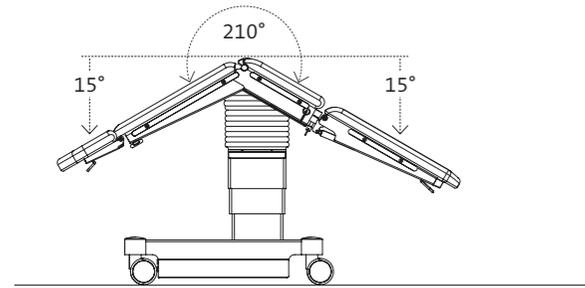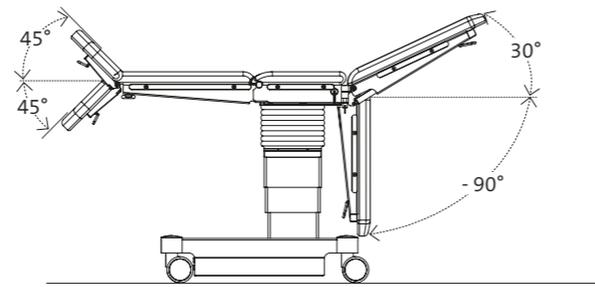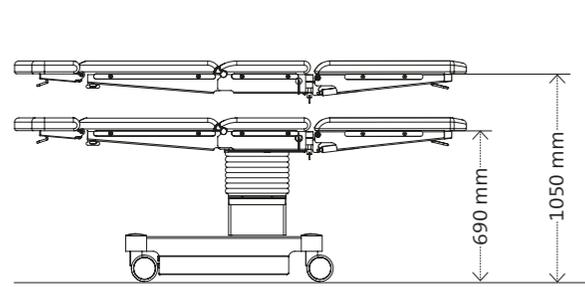





Nur Modelle 601700 / 601820

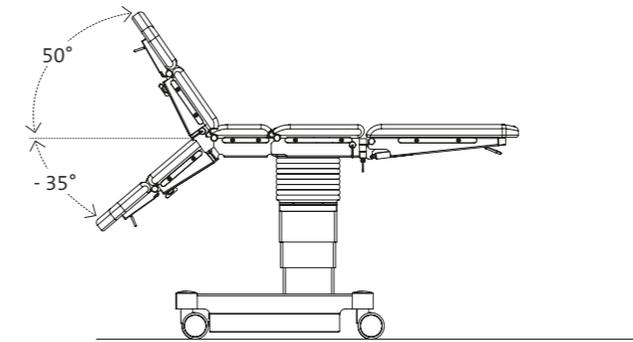



Verschiebbarkeit der Tischplatte
(nur Modelle 601120 und 601820)

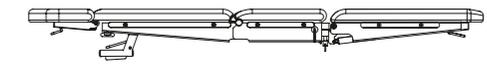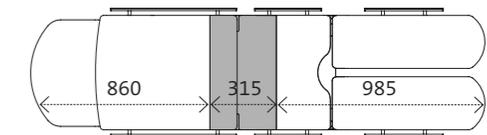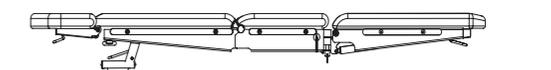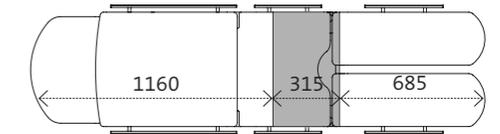

Grundriss 601120

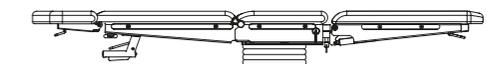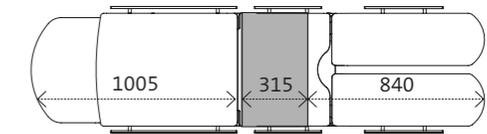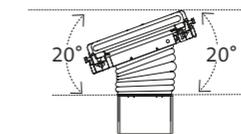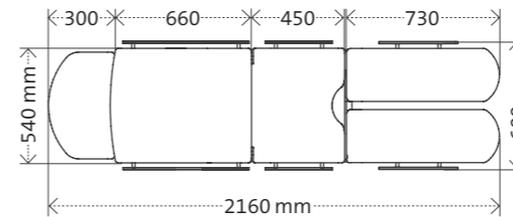

Grundriss 601700 / 601820

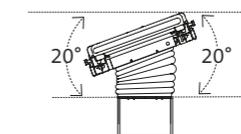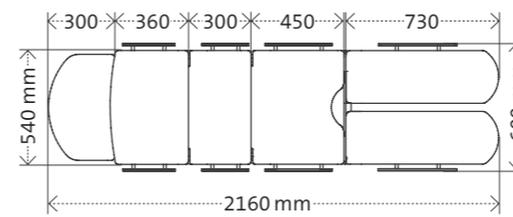



Konfigurationsmöglichkeiten am Beispiel der Modelle 601700 und 601820.

Konfiguration

Zubehör für medifa 6000



Kopfplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61144

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -45° bis +45°
- L x B: 285 x 495 mm
- An- und Abkopplung an Rückenplatte
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61144SF)



Kopfplatte mit Doppelgelenk für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61146

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -45° bis +45°, zusätzliche Neigung durch Doppelgelenk
- L x B: 285 x 495 mm
- An- und Abkopplung an Rückenplatte
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61146SF)



Kleine Kopfplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61143

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -45° bis +45°
- L x B: 230 x 230 mm
- An- und Abkopplung an Rückenplatte
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61143SF)



Obere Rückenplatte für Variante 601700 und 601820

Art.-Nr. 61250


- An- und Abkopplung an Rückenplatte
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- L x B: 360 x 540 mm
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61250SF)



Körperbrücke für medifa 5000 und Variante 601120

Art.-Nr. 61655

- Ausfahrbar mittels Handkurbel
- L x B: je Segment 315 x 170 mm
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61655SF)
- Nicht nachrüstbar!

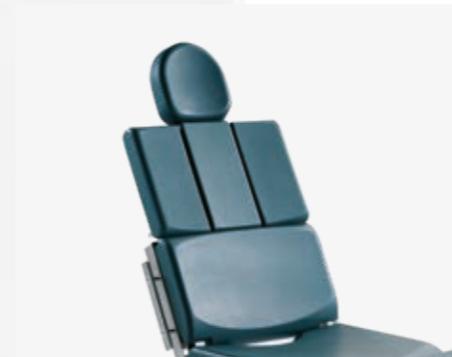

Dreigeteilte Rückenplatte für medifa 5000 und Variante 601120

Art.-Nr. 61385

- Inkl. Kopfplatte mit Gasdruckfederverstellung
- Einfacher Zugang zum Schulterbereich durch drei abnehmbare Segmente
- An- und Abkopplung am Beckenteil (Reverse-Mode)
- L x B: je Segment 315 x 170 mm
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61385SF)

Zubehör für medifa 6000



Dreigeteilte Rückenplatte für Variante 601700 und 601820

Art.-Nr. 61390

- Inkl. Kopfplatte mit Gasdruckfederverstellung
- Einfacher Zugang zum Schulterbereich durch drei abnehmbare Segmente
- An- und Abkopplung an unterer Rückenplatte
- L x B: je Segment 315 x 170 mm
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61390SF)



Beckenteilverlängerung für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61125

- Verlängerung des Beckenteils um 430 mm
- Polsterausschnitt
- L x B: 430 x 540 mm
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61125SF)



Einteilige Beinplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61625

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -90° bis +30°
- L x B: 670 x 540 mm
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61625SF)



Geteilte Beinplatten für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61615

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -90° bis +30°, schwenkbar um bis zu 180°
- L x B: jede 730 x 250 mm
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: PUR, H= 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61615SF)



Doppelt geteilte Beinplatten für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61660

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -90° bis +30°, schwenkbar um bis zu 180°
- L x B: jede 720 x 250 mm
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: PUR, H= 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61660SF)



Carbonlagerungsplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61690

- Sehr gute Durchleuchtbarkeit (360°)
- An- und Abkopplung an Beckenteil oder unterem Rückenteil
- L x B: 750 x 540 mm
- Polster: Viskoelastischer Schaumstoff, H= 60 mm, elektrisch ableitfähig

Zubehör für medifa 6000



Transfer-Beinplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61635

- Für die kurzzeitige Lagerung der Beine
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- L x B: jede 900 x 500 mm
- Material: Edelstahl



Kinderchirurgieplatte für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61633

- An- und Abkopplung an Beckenteil
- L x B: 700 x 430 mm
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: Viskoelastischer Schaumstoff, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, abnehmbar



Verbreiterungssegmente für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61355

- Segmente zur Verbreiterung der OP-Tisch-Liegefläche
- L x B: je Segment 310 x 105 mm
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: PUR, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig
- Alternativ mit viskoelastischem Komfort-Polster H= 80 mm (Art.-Nr. 61355SF)
- Mengeneinheit: Paar



Fußschalter für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 604060

- Zur Steuerung der Grundfunktionen Höhen-, Lateral- und Trendelenburg-verstellung
- Kabelgebunden
- Nicht nachrüstbar!



Infrarot Handschalter medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 604070

- Kabellose Datenübertragung
- Bedienfeld für alle elektrischen OP-Tisch-Funktionen
- Inkl. Ladestation



Manuelles Sicherheitssystem für medifa 6000

Art.-Nr. 50655

- System zur Sicherstellung des OP-Tisch-Betriebs im Falle eines elektronischen Defekts oder einem Ausfall der Stromversorgung
- Überbrückung der elektrischen Funktionen durch manuelle Fußpedalauslösung
- Nicht nachrüstbar!

Zubehör für medifa 6000



Stabilitätszylinder für medifa 6000

Art.-Nr. 50650

- Ausfahrbar
- Für optimale Standfestigkeit des Operationstisches
- Nicht nachrüstbar!



Verbindungsstrebe für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61670

- Austausch der Edelstahl-Verbindungsstrebe am Rückenteil gegen eine röntgentransparente Verbindungsstrebe aus speziellem Kunststoff
- Verbessert die Röntgentransparenz des Rückenteils



Kassettenschieber für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61640

- Zum Einschieben von Röntgenkassetten
- Ausziehbare Teleskopstange
- L x B x H: 470 x 385 x 16 mm
- Für Röntgenkassetten mit Maßen 14" x 17" (US) geeignet
- Material: Edelstahl



TUR-Spülset für medifa 5000 und 6000

Art.-Nr. 61120

- Bestehend aus Ablaufschale, Eimer, Becken, Sieb, Schlauch und Fahrgestell
- Adaption am Beckenteileinschub
- L x B x H (Schale): 325 x 265 x 65 mm
- Volumen (Eimer): 15 Liter



Polsterauflage für medifa 5000 und Variante 601120

Art.-Nr. 5000SF

- Alternative Polsterung der Liegefläche mit viskoelastischen Komfort-Polstern
- Mit drei verschiedene Schaumstoffschichten und Memoryeffekt
- Polsterhöhe: 80 mm

Polsterauflage für medifa 601700 und 601820

Art.-Nr. 6000SF

- Wie 5000SF, jedoch nur für Varianten 601700 und 601820

Ergänzendes Zubehör

Eine Vielzahl an Anbauzubehör ergänzt die disziplinären Anwendungsmöglichkeiten der Operationstische.

Zur zentralen Lagerung des Zubehörs, dient ein Zubehörwagen (Art.-Nr. 341045) aus poliertem Edelstahl.

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Prospekt „Zubehör für Operationstische“.



medifa

Die medifa healthcare group vereint Kompetenz rund um den OP unter einem Dach.


medifa® ist ein inhabergeführtes und weltweit agierendes Unternehmen in der Medizintechnik und deckt mit ihrem Produkt- und Leistungsportfolio den kompletten Bereich von modularen Wand-, Tür- und Decken-Systemen (RooSy® Room Systems) für den schlüsselfertigen OP, mobilen OP-Tischen und OP-Tisch Zubehör bis zu Untersuchungsstühlen ab. Einer der größten deutschen OEM-Zulieferer im Medizintechnik Sektor ist ebenfalls Teil von medifa.

Zur Gruppe gehören die medifa GmbH & Co. KG (Finnentrop), die medifa hygienic rooms GmbH (Ötigheim) und die medifa metall und medizintechnik GmbH in Rastatt. Die medifa healthcare group beschäftigt an drei Standorten in Deutschland rund 350 Mitarbeiter. Planung, Engineering und Fertigung erfolgen ausschließlich in Deutschland und mit über 90% Wertschöpfung im Unternehmensverbund gewährleistet die Gruppe kurze Reaktionszeiten.

Unter dem Motto „we care“ versteht man bei medifa® die konsequente Ausrichtung nach den Bedürfnissen ihrer Kunden. Kunden weltweit können sich auf erstklassige Beratung, Abwicklung und Qualität aus einer Hand made in Germany nach zertifizierten nationalen und internationalen Qualitätsstandards verlassen.

Standorte und Export

- Modulare OP-Raum-Systeme: Decken, Türen, Wände (RooSy)
- Mobile OP-Tische und OP-Tisch-Zubehör
- Untersuchungs- und Behandlungsstühle
- Sonderbaulösungen

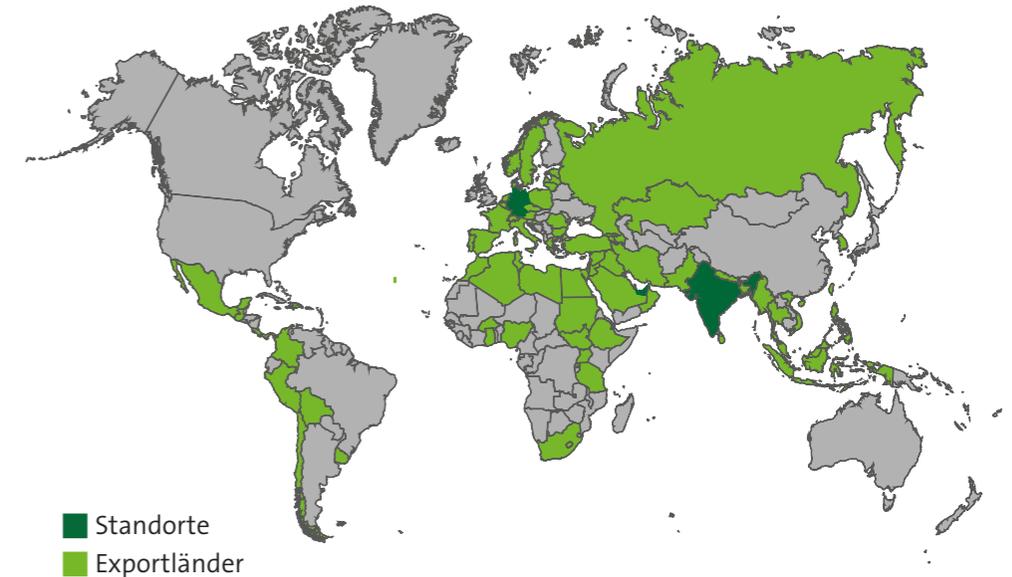

■ Standorte
■ Exportländer

we care.



Version 02-19-DE
Änderungen vorbehalten.

www.medifa.com

medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
57413 Finnentrop

Germany

fon +49 2721 71 77 -0

fax +49 2721 71 77 -255

info@medifa.com

we care.